





KITS DE DIAGNOSTICO MOLECULAR POR PCR EN TIEMPO REAL FIND-IT®


Nuestros sistemas de diagnóstico molecular por PCR en Tiempo Real emplean **sondas tipo Taqman**, sumamente específicos y sensibles. Los kits contienen **un control interno**, que siempre amplifica, lo que ayuda a monitorear la presencia de sustancias inhibidoras y descartar **falsos negativos**. Igualmente, se proporciona un **DNA control positivo**, que evalúa la funcionalidad del sistema y que se puede emplear como un **estándar de cuantificación**, para obtener una curva de referencia, lo que **permite cuantificar** de forma absoluta el número de moléculas virales presentes. Por lo anterior, nuestros sistemas son altamente confiables, reproducibles, auto verificables, que detectan los virus de forma cualitativa y cuantitativa.

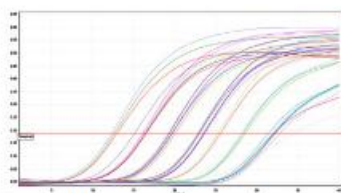

Amplificación diferentes cantidades ADN

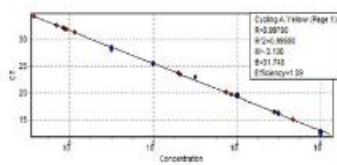

Curva estándar de cuantificación.
ADN de referencia diluciones 1/10

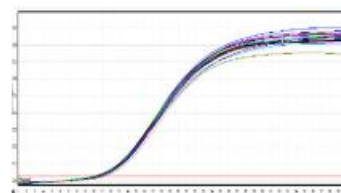

Amplificación control interno en diferentes muestras

Kits de Diagnóstico Molecular por PCR en Tiempo Real

AVES

Virus de Influenza Tipo A
Virus de Influenza aviar, diferencia serogrupo H5 y H7
Virus de Bronquitis Infecciosa Aviar
Virus de la Enfermedad de Newcastle

CERDOS

Virus del PRRS
Circovirus Porcino tipo 2
Virus de Influenza Tipo A
Diarrea epidémica porcina - PED

BOVINOS

Virus Herpesvirus bovino tipo I (IBR)
Virus de Diarrea Viral Bovina (DVB) Diferenciación genotipos I y II.
Virus Sincitial Respiratorio Bovino (BRVS)
Virus de la Leucosis Bovina (LB)
Virus Parainfluenza Bovina 3 (PI3)
Detección múltiple DVB-BRSV
Detección múltiple IBR-LB
Virus de Influenza Tipo A
Leptospira spp.

PERROS - GATOS

Virus de Distemper canino
Virus del Parvovirus canino
Virus de Coronavirus canino
Virus de la Leucemia Felina
Leptospira spp.

INOCUIDAD ALIMENTARIA- FOOD-SAFETY

Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp y Listeria spp.

DESCRIPCIÓN Y PRECIOS

AVES

Find-IT Influenza tipo A.

Kit para la detección y cuantificación del virus de Influenza Tipo A por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FI 100 - Sistema para **100** reacciones **\$ 15,000.00**

Find-IT Influenza IA - H5H7-EG.

Kit para la detección y diferenciación del virus de Influenza Tipo A serogrupo H5 y H7 por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso empleando Evagreen.

FIH5 100 - Sistema para **100** reacciones **\$ 20,000.00**

Find-IT Newcastle.

Kit para la detección del virus de la enfermedad de Newcastle por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FN 100 - Sistema para **100** reacciones **\$ 15,000.00**

Find-IT Bronquitis Infecciosa Aviar.

Kit para la detección del virus de Bronquitis Infecciosa Aviar por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso empleado sondas TaqMan.

FBIA 100 – Sistema para 100 reacciones. **\$ 15,000.00**

CERDOS

Find-IT Circovirus

Kit para la detección y cuantificación del virus de Circovirus Porcino Tipo 2 por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FCP2 100 - Sistema para **100** reacciones **\$ 10,000.00**

Find-IT PRRS

Kit para la detección y cuantificación del virus del Síndrome Respiratorio y Reproductivo Porcino por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FPRRS 100 - Sistema para **100** reacciones **\$ 15,000.00**

Find-IT PED

Kit para la detección y cuantificación del virus de la Diarrea Epidémica Porcina por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FPED 100 - Sistema para **100** reacciones **\$ 15,000.00**

Find-IT Influenza tipo A.

Kit para la detección y cuantificación del virus de Influenza Tipo A por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FI 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 15,000.00**

BOVINOS

Find-IT DVB

Kit para la detección y cuantificación del virus de la Diarrea Viral Bovina genotipo I y 2 por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FDVB 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 20,000.00**

Find-IT BRSV

Kit para la detección del virus Sincitial Respiratorio Bovino por Transcripción Reversa y PCR en Tiempo Real en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FBRV 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 15,000.00**

Find-IT Leucosis Bovina

Kit para la detección y cuantificación del virus de la Leucosis Bovina por PCR en Tiempo Real en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FLB 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 10,000.00**

Find-IT DVB - BRSV

Sistema para la detección y cuantificación simultánea del virus Sincitial Respiratorio Bovino (RSVB) y el virus de la Diarrea Viral Bovina genotipo 1 y 2 (DVB I-II), por transcripción reversa y PCR en tiempo real en un solo paso.

FDVB – BRSV 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 30,000.00**

BRSV Find-IT IBR - LB.

Sistema para la detección y cuantificación simultánea del virus de Leucosis Bovina (BLV) y el Herpesvirus bovino tipo I o Rinotraqueitis Infecciosa Bovina (IBR), por PCR en tiempo real en un solo paso.

FIBR – LBV 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 20,000.00**

Find-IT Leptospira

Sistema para la detección y cuantificación por PCR en tiempo real en un solo paso la presencia del genoma del grupo bacteriano de **Leptospira spp.**, empleando como blanco de amplificación el **gen LipL32** de estas bacterias.

FLepo 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 10,000.00**

Find-IT Influenza tipo A.

Kit para la detección y cuantificación del virus de Influenza Tipo A por Transcripción Reversa y qPCR en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FI 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 15,000.00**

PERROS – GATOS

Find-IT Distemper

Kit para la detección del virus del Distemper canino por Transcripción Reversa y PCR en Tiempo Real en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FDC 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 15,000.00**

Find-IT Leucemia Felina

Kit para la detección del virus de la Leucemia Felina por PCR en Tiempo Real en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FLC 100 - Sistema para 100 reacciones **\$ 10,000.00**

Find-IT Parvovirus Canino

Kit para la detección del virus del Parvovirus Canino por PCR en Tiempo Real en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

PVC 100 - Sistema para **100** reacciones

\$ 10,000.00

Find-IT Coronavirus Canino

Kit para la detección del coronavirus canino por RT-PCR en Tiempo Real en un solo paso, empleado sondas TaqMan.

FCVC-TR 100 - Sistema para **100** reacciones

\$ 15,000.00

INOCUIDAD ALIMENTARIA - FOOD-SAFETY

FIND-IT Food-Safety

Detección y cuantificación simultánea de bacterias patógenas en productos alimenticios: Escherichia coli O157:H7, Salmonella spp y Listeria spp.

FFSty 100 - Sistema para **100** reacciones

\$ 30,000.00